



# ИНСТРУКЦИЯ

Электрическое одеяло Belberg BL-06

Модель: BL-06



## **Уважаемый покупатель!**

Спасибо за приобретение выпускаемого нами изделия. Наши продукты являются высококачественными и всесторонне проверенными изделиями для обогрева, измерения кровяного давления, температуры тела, веса, для проведения мягкой терапии, массажа и для подачи воздуха. Прочитайте, пожалуйста, внимательно данную инструкцию по использованию и учтите приведенные в ней указания.

### **1. Важные указания**

Несоблюдение приведенных ниже указаний может приводить к травмам людей или материальному ущербу (поражению электрическим током, ожогам кожи, пожару). Приведенные ниже указания служат не только для защиты Вашего здоровья и здоровья других людей, но и для защиты самого изделия. Поэтому строго соблюдайте эти указания и передавайте данную инструкцию новому пользователю при передаче изделия.

- Используйте данную электрическое одеяло только в целях, описанных в данной инструкции;
- Данная электрическое одеяло не предназначена для использования в больницах;
- Данная электрическое одеяло не предназначена для использования лицами (в т. ч. детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостатком опыта и/или знаний, за исключением случаев, когда они находятся под постоянным присмотром ответственных за них лиц;
- Не использовать данную электрическое одеяло для людей, находящихся в беспомощном состоянии, малолетних детей и лиц, не чувствительных к теплу;

- При известных обстоятельствах, исходящие от этой электрического одеда электромагнитные поля могут нарушать работу кардиостимулятора. Однако показатели этих полей находятся в допустимых пределах:
  - напряженность электрического поля: макс. 5000 В/м,
  - напряженность магнитного поля: макс. 80 А/м,
  - величина магнитной индукции: макс. 0,1 миллитесла.
 Поэтому перед использованием данного изделия проконсультируйтесь с врачом и изготовителем кардиостимулятора;
- Данную электрическое одеяло:
  - разрешается присоединять только к указанному на приборе напряжению,
  - разрешается эксплуатировать только с указанным на приборе (этикетке) выключателем,
  - запрещается включать в скрученном или сложенном состоянии,
  - запрещается заправлять в кровать и укладывать вокруг матраца,
  - не зажимать (особенно в случае раскладных кроватей или составных матрацев),
  - не перегибать под острым углом, – не использовать для лечения животных,
  - не использовать во влажном состоянии.
- Когда электрическое одеяло включено, запрещается:
  - класть на него какие-либо предметы (например, чемодан или корзину для белья),
  - класть на него источники тепла, например, грелку, электрогрелку и т. д.
- Электронные узлы в выключателе электрического одеяла при использовании вызывают легкий нагрев выключателя. Поэтому во время работы выключатель не должен быть перекрыт или лежать на включенном одеяле;
- Не тянуть, не скручивать и не перегибать сетевые кабели;
- Не втыкать в электрическое одеяло иголки или другие острые предметы;

- Детям запрещается пользоваться этим электрическим одеялом, за исключением случаев, когда выключатель предварительно отрегулирован родителями или воспитателями, или, когда ребенок достаточным образом проинструктирован о безопасном использовании;
- Во избежание игр с электрическим одеялом дети должны находиться под присмотром;
- Электрическое одеяло регулярно проверять на наличие признаков износа или повреждений. При обнаружении подобных признаков или в случае неправильного использования прибора перед повторным использованием его необходимо отнести для проверки в сервисную службу или в соответствующую торговую организацию;
- Если провод сетевого питания электрического одеяла поврежден, то во избежание опасности его должна заменить сервисная служба. Такой ремонт платный, как и сам новый провод;
- Ремонт разрешается выполнять только специалистам ремонтной мастерской, т. к. для ремонта требуются специальные инструменты. Из-за неправильно выполненного ремонта могут возникнуть серьезные опасности для пользователя;
- При возникновении вопросов по использованию прибора обратитесь в нашу сервисную службу.

## **2. Использование по назначению**

Данное электрическое одеяло предназначено только для обогрева человеческого тела, выбрав при этом подходящий для Вас температурный режим. Время предварительного нагрева составляет около 30 - 40 минут. Его можно использовать любой стороной.

## 3. Использование

### 3.1 Техника безопасности


Электрическое одеяло с подогревом оснащено системой безопасности. Эта система построена на основе электронных датчиков и предотвращает перегрев прибора по всей плоскости путем его отключения в случае сбоя. После автоматического отключения прибора системой безопасности по причине сбоя, сигнальная лампочка не будет гореть, даже если прибор включен. Помните, что по соображениям безопасности пользоваться одеялом после произошедшего сбоя нельзя, а следует отослать его по указанному адресу сервисной службы.

### 3.2 Подготовка к использованию



**Внимание!** В процессе использования одеяла с подогревом температура выключателя слегка поднимается из-за наличия в нем электрических компонентов. По этой причине запрещается класть выключатель на поверхность одеяла или накрывать его подушкой и т. д.

Для ввода прибора в работу соедините вначале выключатель с нагревательным элементом, соединив штепсельный разъем.

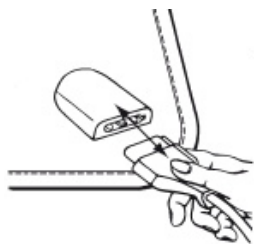

Разъём расположен у самого края одеяла. Такое местоположение является оптимальным. Он не мешает во время сна.

Рис. 1

Вначале проверьте, соединен ли выключатель с электрическим одеялом посредством штепсельного разъема. Затем вставьте вилку в розетку. Чтобы электрическое одеяло быстро прогрелось, настройте его вначале на максимальную температуру. После этого, чтобы пользоваться электрическим одеялом на протяжении нескольких часов, установите самый низкий температурный режим.

#### 4. Запуск и настройка температуры



Рис. 2

- Чтобы включить нагревательный элемент, вставьте вилку в розетку, в этот момент на экране цифрового дисплея отобразится «ноль», через 1 секунду «ноль» исчезнет, а нагревательный элемент подключится к источнику питания, об этом будет сигнализировать горящая красная точка;
- Нажмите кнопку «ON/OFF», чтобы включить одеяло, а затем нажмите кнопку «Temp.», чтобы выбрать нужную температуру, от уровня 1 до уровня H, нажмите «+», чтобы повысить уровень температуры, и нажмите «-», чтобы понизить уровень температуры;
- Нажмите кнопку «Timer», чтобы выбрать время от 1 до 9 часов, нажмите «+», чтобы увеличить время, и нажмите «-», чтобы уменьшить время;
- Система подтвердит ваш выбор, одеяло автоматически отключится после выбранного времени;
- Нажмите кнопку «ON/OFF», чтобы перезапустить одеяло, уровень нагрева 1,2,3 и 4 подойдет для непрерывного использования;
- По умолчанию одеяло запрограммировано на работу с настройками 3-х часового таймера времени и 4-го уровня нагрева, при включенном питании.

Электрическое одеяло оснащено внутренним термостатом, который автоматически регулирует температуру и поддерживает ее на постоянном уровне. Это устройство будет регулировать комфортное и безопасное тепло.

## **5. Автоматическое отключение**

Одеяло с электроподогревом отключается автоматически после выбранного времени. Это экономит энергию и обеспечивает дополнительную безопасность, так как подогреваемые одеяла не могут работать без присмотра.

После использования, пожалуйста, отсоедините шнур питания от электрической розетки.

## 6. Чистка и уход

Перед тем как приниматься за чистку одеяла с подогревом, обязательно вытащите штекер из розетки.

Небольшие пятна удаляются тряпкой или влажной губкой, в случае необходимости с применением небольшого количества жидкого мягкого чистящего средства.

**Помните!** Электроодеяло нельзя подвергать химической чистке и механической сушке, а также выкручивать, катать и гладить. Не используйте для закрепления одеяла при сушке прищепки и тому подобные предметы.



**Ни в коем случае не включайте одеяло, чтобы ускорить ее высыхание!**

- Поскольку электронные компоненты электроодеяла герметично закрыты, ее можно стирать вручную или в стиральной машине. Однако мы рекомендуем стирать устройство только в теплой воде при температуре 40 °С для ручной стирки;
- Для стирки в стиральной машине, пожалуйста, обратите внимание:
  - Выберите программу для стирки шерсти (до 40 °С);
  - Используйте стиральный порошок для деликатных тканей;
  - Не используйте сухие средства для сушки под давлением.

**Пожалуйста, также прочитайте примечания ниже, которые применимы ко всем видам электроодеял:**



Не гладить;



Не использовать хлорсодержащие вещества;





Не пользоваться химчисткой;



Не пользоваться сушилкой.

- Не использовать очистители под давлением;
- Убедитесь, что термостат не соприкасается с какими-либо жидкостями. Жидкость может вызвать повреждения;
- Никогда не используйте электроодеяло, если оно влажное или мокрое;
- Дайте электрическому одеялу высохнуть на воздухе. Не используйте вешалки для белья, чтобы повесить ее. Это может повредить провода.

## **7. Хранение и периодическая проверка**

- Не сминайте электроодеяло. Аккуратно сложите изделие для хранения;
- Храните устройство в сухом месте, если оно не используется;
- Перед тем, как складывать одеяло, убедитесь, что оно остыло.
- Регулярно проверяйте устройство и шнур питания на наличие признаков износа или повреждения;
- Не используйте химические средства от моли;
- Не кладите на устройство тяжелые предметы при его хранении, это может повредить электрические провода;
- Пожалуйста, верните устройство в пункт продажи в случае износа или неисправности.

## **8. Техническая информация**

Модель: BL-06

Размер: 150x200 см

Электропитание: AC 220-240V 50Hz  
Потребляемая мощность: 180 Вт  
Автоматический таймер: 1-9 часов  
Вес Нетто / Брутто: 2.2 кг /2.3 кг  
Габаритные размеры упаковки ДхШхВ: 43\*18\*39  
Комплектация: электрическое одеяло, пульт управления,  
инструкция.

Устройство оснащено двойной защитной изоляцией и соответствует классу защиты II.

## 9. Утилизация

По истечении срока службы утилизируйте это устройство в соответствии с директивой об утилизации электрического и электронного оборудования 2002/96 / EC (WEEE).



Данный знак на продукте или его упаковке информирует вас о том, что этот продукт нельзя рассматривать как обычные бытовые отходы. В случае утилизации продукт должен быть возвращен в пункте сбора для переработки электронных и электрических устройств.

## Условия гарантии и ремонта

Пожалуйста, свяжитесь с вашим дилером или сервисным центром в случае претензии по гарантии. Если вам необходимо вернуть устройство, приложите копию квитанции и укажите, в чем заключается неисправность.

### Применяются следующие условия гарантии:

- Гарантийный срок на продукцию составляет 12 месяцев со дня продажи через розничную сеть.

- Настоящая гарантия имеет силу при соблюдении следующих условий: правильное и четкое заполнение Гарантийного Сертификата, наличие чека, содержащего дату покупки.
- Наша компания оставляет за собой право в отказе от гарантийного обслуживания в случае не представления вышеуказанных документов или если информация в них будет не полной, неразборчивой, противоречивой, что вызовет сомнения или затруднения в установлении факта и даты приобретения изделия.
- Ремонт по гарантии не продлевает гарантийный срок ни на устройство, ни на запасные части.
- Гарантия включает в себя выполнение ремонтных работ и замену неисправных частей.
- Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание.
- Не подлежат гарантийному ремонту, а также замене или возврату изделия с дефектами, возникшие вследствие: механических повреждений, несоблюдения условий эксплуатации или ошибочных действий владельца, на дефекты, о которых покупатель знал в момент покупки - на случаи собственной вины покупателя, попадания внутрь посторонних предметов, жидкости, насекомых, ремонта или внесения конструктивных изменений неуполномоченными лицами, подключения изделия к питанию не соответствующего ГОСТА.

Made in CHINA

Поставщик: ИП Гаврюсев Сергей Николаевич

Адрес: Московская обл., г. Ногинск, ул. Климова 38

Все замечания и предложения по качеству изделий просим Вас направлять по адресу: [info@belberg.de](mailto:info@belberg.de)

## Сервисный центр

111141, Москва, ул. Кусковская 20А, офис 514А

Тел: +7 (926) 650-36-72

### Гарантийный Талон

Название изделия	Электрическое одеяло BL-06
Модель	BL-06
Дата продажи	____/____/____ Дата, месяц, год
Пользователь	Ф.И.О.: _____ Адрес: _____ _____ Телефон: (____) _____
Продавец	Наименование: _____ _____ Телефон: (____) _____ М.П.